

Patients to be reported (Dicteren)

With this button you call the **Ondersteuning** to this side!

[Startpagina] [Zoekopdracht afspraak] [Status afspraak] [Beeld en verslaginzage] [Dicteren] [Ondersteuning] [Afmelden]

EB telework > Dicteren

Datum Categorie Artsgroep Ruimtegroep

Zoeken

Let a.u.b. op de datumfilter en klik dan op zoeken.[zoeken].
Om geen datumbepering te hebben, klik het vinkje bij [onderzoeksdatum] weg.

If you mark the checkbox on "Onderzoeksdate", "Categorie", "Artsgroep" or "Ruimtegroep", you will get the respective control element with which you can **set an individual filter** for the list.

If you have set the Filter, click on the "Search" button to **reload** the list.

1000 zinnen beschikbaar.

Naam	Vorname	Geboren	Verw.	Verzekering	Onderzoek	Onderzoeking	Verslag	Beeld
[redacted]	[redacted]	17-11-2014	Atrium	[redacted]	7-4-2015	ECHO HEUP/OND.EXT	verslag	gearchiveerd Zip-File OsiriX
[redacted]	[redacted]	9-7-1943	Atrium	[redacted]	7-4-2015	SCHOUDER/HUMERUS R, echo/schouder r.	verslag	gearchiveerd Zip-File OsiriX
[redacted]	[redacted]	14-2-1981	Atrium	[redacted]	7-4-2015	ECHO BOVENBUIK	verslag	gearchiveerd Zip-File OsiriX
[redacted]	[redacted]	29-10-1953	Atrium	[redacted]	7-4-2015	CERVICALE WK	verslag	geen
[redacted]	[redacted]	4-1-1937	Atrium	[redacted]	7-4-2015	DEXA	verslag	gearchiveerd Zip-File OsiriX
Mevrou [redacted]	[redacted]	16-5-1941	Atrium	[redacted]	7-4-2015	CERVICALE WK	verslag	hersteld
Heer [redacted]	[redacted]	21-6-1967	Atrium	[redacted]	7-4-2015	POLS/HAND/MIN R	verslag	gearchiveerd Zip-File OsiriX
Mevrou [redacted]	[redacted]	11-9-1984	Atrium	[redacted]	7-4-2015	ECHO ONDERBUIK	verslag	geen
Heer [redacted]	[redacted]	25-2-2002	Atrium	Soomers F.L.M.	7-4-2015	POLS/HAND/MIN R	verslag	gearchiveerd Zip-File OsiriX

If you click on one of the **links** (except image) for the desired patient, you will be taken to the **patient page**, where you can find and dictate all important information about the patient.

If you click on the "image" link for the respective patient, you will be taken to the **image view page** and can thus view the images of the patient.

PACS imagepro

Folder | Layout | Image | Info

mem: ██████████

TEST-AS Test, 01.01.1980

Befund öffnen

1) 2) 3) 4) 5)

00:00 / 00:00

6) 7)

1	* Untersuchung	#S	Vorsch
	27.02.2015: CLA11	4	
	Ellbogen AP L	1	
	Ellbogen LAT L	1	

ActiveX Recorder

- 1) Rewind back to the beginning
- 2) Start recording
- 3) Stop recording / playback mode
- 4) Play
- 5) Spool tot he end
- 6) Upload dictation
- 7) Discard dictation




durchschaubare IT für die Radiologie



Flash Recorder

By clicking on [Nieuwe dictaat] you can create a new dictation for the examination.

ag	Beeld	Dictaten beheren	Dictaten
	gearchiveerd Zip-File OsiriX	Nieuwe dictaat	ma - aanpassing [7-4-2015]

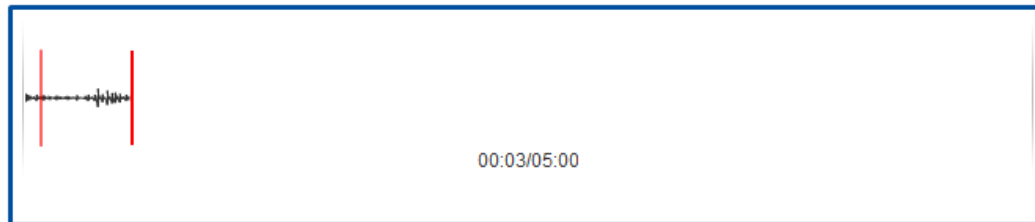

- 1) Discard dictation (only possible after having uploaded it temporarily – check mark)
- 2) Set dictation position at the beginning
- 3) Rewind (press and hold in play mode)

- 4) Start / stop recording
- 5) Start / stop playback mode
- 6) Fast forward (hold down in play mode)
- 7) Put recording position at the end
- 8) Activate / deactivate insert mode (afterwards click on start / stop recording again)
- 9) Upload temporarily
- 10) Actual upload (only possible after saving temporarily - check mark)

Flash installieren

Check if you have a the most recent version of Adobe Flash Player. If you don't, go to <https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=de> and install the latest version.

Flash konfigurieren/zulassen

If Flash is installed, but you can not record anything yet, then check if a popup has appeared which could suppress Flash.

If not, right-click on the Flashplayer → [Settings], tab "Access protection", click on [Allow] and set a check mark in the box next to " Save "and then click on [Close].

Drücken Sie auf den roten Knopf um mit der Aufnahme zu beginnen.

00:00/10:00



- 164
- Vergrößern
- Verkleinern
- Alles zeigen
- Qualität ▶
- Drucken...
- Einstellungen...**
- Globale Einstellungen...
- Info über Adobe Flash Player 15.0.0.223...

documenten van de laatste 100 dagen getoond. Klik op de documentnaam om

Einstellungen für Adobe Flash Player

Zugriffsschutz
localhost den Zugriff auf Ihre Kamera und Ihr Mikrofon gestatten?

Zulassen Verweigern

Speichern

Schließen



If your dictation is too quiet, you can also drag the "Record Volume" regulator to the right in the "microphone" settings. Then click on the [Close] button.

